


Preparación de medios de cultivo

Preparación: 22,5 g en 1 litro de agua desmineralizada. Calentar en agua hirviendo hasta la disolución completa. Autoclavar (15 minutos a 121°C).
pH: 7,0 ± 0,2 a 25°C.

steriles, se

material

- Elegir el medio de cultivo.
- Pesar.
- Disolver.
- Medición de pH.
- Acondicionar.

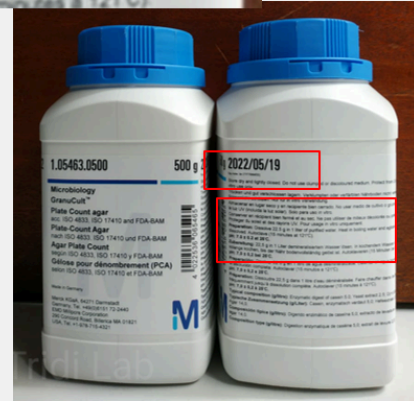

Preparación de medios de cultivo

- Pesar la cantidad de medio de cultivo deshidratado comercial o sus componentes, indicada en manual de la marca correspondiente en un recipiente adecuado (frasco, vaso de precipitados, etc.).
- Registrar la masa, en *Control de preparación de medios de cultivo*.
- Agregar la cantidad de agua desionizada necesaria en el recipiente contenedor.
- Registrar el volumen, en *Control de preparación de medios de cultivo*.
- Dejar hidratar los medios de cultivo durante 15 minutos, agitando periódicamente. Controlar el pH.
- Identificar con marcador indeleble el nivel máximo del frasco, disolver con cuidado en un Baño María a 100°C, agitando frecuentemente.
- Si durante el calentamiento, hubo una pérdida significativa de agua, puede ajustarse el volumen con agua desionizada a ~45 °C, considerando la marca inicial realizada.
- Fraccionar, de ser necesario, los medios de cultivos en frascos o tubos de ensayo según lo requerido. Tapar los frascos en forma no hermética.
- Acondicionar: Poner a cada grupo de tubos y frascos, un capuchón de papel con etiqueta. Todo debe estar rotulado con qué medio es, fecha y nombre.

Preparación de medios de cultivo

Al momento de almacenar los medios Registrar:

- La fecha de vencimiento de cada medio, hay que establecerla (1 semana luego de su elaboración).
- El relevamiento de fechas de medios de cultivo preparados se realiza semanalmente.
- Controlar el pH e indicarlo en la planilla correspondiente (Control de preparación de medios de cultivo).
- En caso de no cumplimentar con el pH especificado, ajustarlo con solución de NaOH o HCl al 10%. Para los medios fraccionados en tubos, descartar el lote.

A tener en cuenta:

- Cuando un medio de cultivo presenta en su composición un compuesto termolábil, se debe esterilizar este componente por separación mecánica (filtración) y luego añadirlo en forma aséptica, al medio de cultivo base.